

KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

ブラインドフォールドスタンド

[BFST-1860]

取り扱い及び設置説明書



お客様へ

このたびは、キクチブラインドフォールドスタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- お使いいただく前に「取り扱い及び設置説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取り扱い及び設置説明書」は、お使いいただく方がいつでも見られるところに大切に保管してください

目次

安全上のご注意 2

寸法図・梱包内容物 3

組み立て方法 4～5

収納方法 6

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品をお使いいただく方への危害と財産への損害を未然に防止し、正しく安全にお使いいただくために重要な内容を下記に表示し説明しています。本文をお読みになり内容をよくご確認ください。記載事項をお守りください。記載事項をお守りいただけないことにより生じた損害や、天災などによる損害について当社は一切責任を負いかねます。

■表示内容と異なる誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を、以下の区分で説明しています。


 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を以下の区分で説明しています。

	してはいけない「禁止」を示します。
	「必ず実施していただくこと」を示します。

 実施	●作業を行う前に、取り扱い及び設置説明書を必ずご確認ください。 ●手指の保護のため、手袋をお使いください。 ●設置を行う際は周囲の安全をご確認いただいた上で、作業をおこなってください。 ●スタンドのロック金具は必ず全てロックをかけてください。
 注意	●組み立てや収納時に、関節部やコーナーのロック金具をロックする際には指をはさむなど、けがをしないよう注意してください。 ●スタンドを設置する際には、平らな場所を選んでください。スタンドが傾いていると転倒する恐れがあります。 ●スタンドから暗幕カーテンを取り外す際は、丁寧に取り外すようにしてください。
 禁止	●スタンドは、屋内での使用を想定して設計しております。屋外など天候の影響を受ける場所では、想定外の破損や故障が発生する可能性がありますので必ず屋内に設置してください。
 警告	●設置完了後、スタンドに過度な重量をかけないでください。転倒、落下など怪我の原因、ならびに破損や故障の原因となります。

寸法図

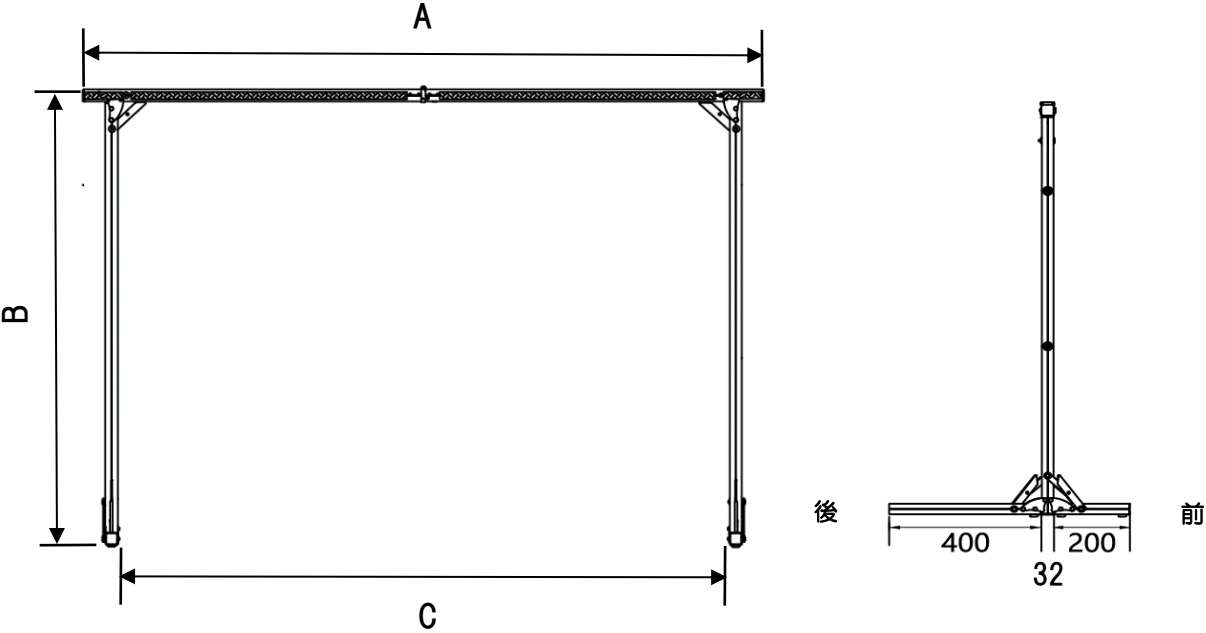

スタンドサイズ 【単位：mm】

型番	外径サイズ		脚幅	重量 (kg)
	A	B	C	
BFST-1860	1860	1100	1636	5.1

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※重量（フレーム 1 台分 付属品 暗幕カーテンを含む）

梱包内容物

品名	入数
取り扱い及び設置説明書	1
スタンドフレーム	2
暗幕カーテン	2

組み立て方法

1. スタンドの組み立て

❗ マジックテープが貼りつけされた面が上側にくるように置いてから組み立てしてください。

図1～図3の順番でスタンドを展開します。

⚠ 注意 フレームを組み立てる際に関節部やロック金具に指をはさむなど、けがをしないようお気をつけください。



図 1



図 2

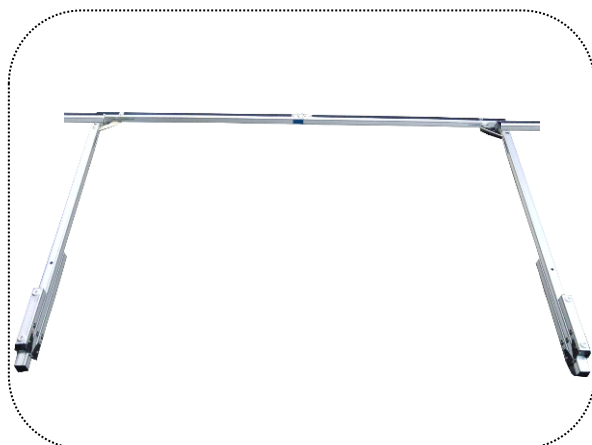


図 3

フレーム中央にあるロック部品を“カチッ”というまで押し込み固定します。




図 4



ロック部品

図 5

❗ ロック部品が“カチッ”というまで押し込んでください

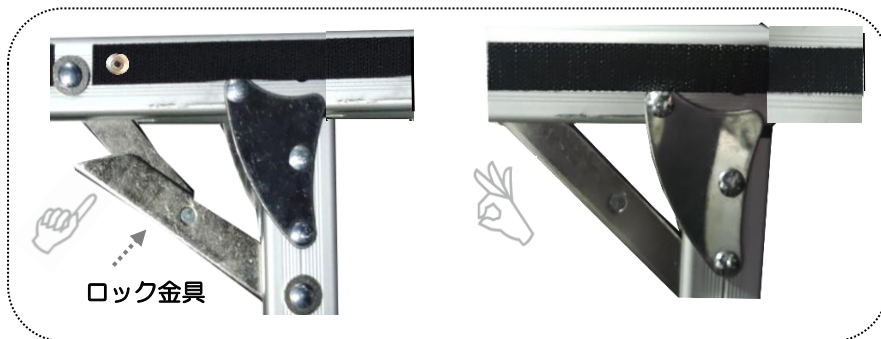

ロック金具

図 6

横フレーム両方のコーナーのロック金具をしっかり押し込んで固定してください。



ロック金具

図 7

左右両側の前脚を起こします。

❗ 各関節部のロック金具は確実に固定してください。

左右の前脚を起こしロック金具を押し込んで固定したらスタンドを起こします。

⚠ 注意 後ろ脚を広げロック金具を固定するまでは絶対に手を放さないでください。転倒する恐れがあります。



図 8

左右の後ろ脚を下げて展開し、ロック金具を押し込んで固定します。

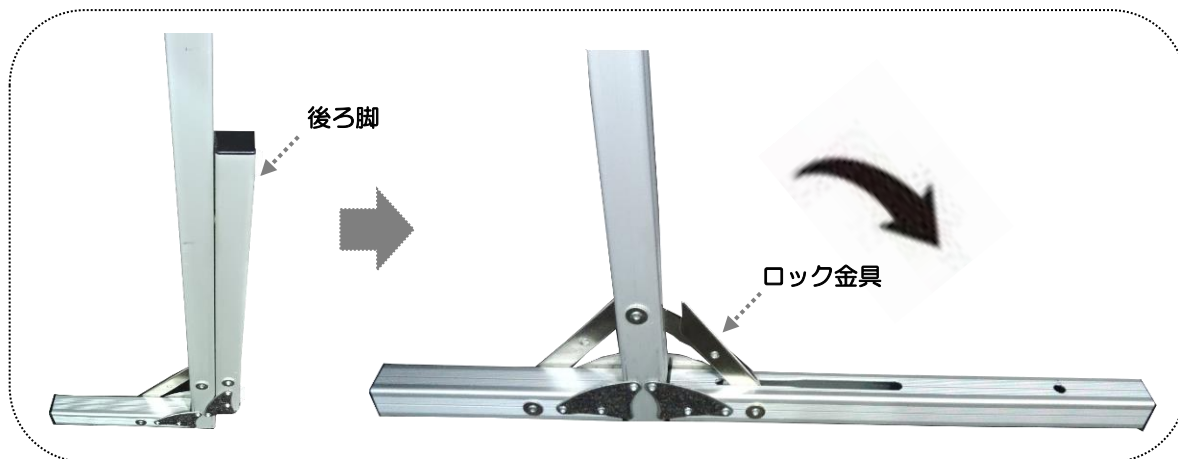


図 9

! ロック金具はすべて必ず押し込んで固定してください。

スタンドの組み立てが完了後、付属の暗幕カーテンを横フレームのマジックテープに合わせて貼り付けします。



図 10

収納方法

スタンドから暗幕カーテンを取り外します。

⚠ 注意 スタンドから暗幕カーテンを取り外す際は、丁寧に取り外すようにしてください。

後ろ脚両側のロック金具を緩めて折りたたみ床に寝かせます。(P.5 図8の状態)

前脚のロック金具を緩めて折りたたみます。(P.4 図3の状態)

横フレーム両端のコーナーのロック金具を緩めます。

横フレームの中央にあるロック部品（青い部品）を指で押し込みながら手前にフレームを少し引くようにして、ロックを解除します。



図 10

ロックを解除したら、両側の脚を内側に寄せてフレームを折りたたみます。

⚠ 注意 フレームを折りたたむ際に関節部やロック金具に指をはさむなど、けがをしないようお気をつけください。

製造販売元

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

株式会社キクチ科学研究所 <http://kikuchi-screen.co.jp/>

本社 〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-12-35 TEL 03-3952-5131 (代)

大阪営業所 〒556-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-5-2 四ツ橋新興産ビル 100B TEL 06-6567-9035 (代)

202406